

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5 режимов работы DF 3000
- Насадка вращается на 360°
- 2-минутный таймер
- Частота пульсации – 1400–1800 в мин.
- Уровень давления жидкости – 210–900 кПа
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Влагозащита – IPX7
- Емкость резервуара – 300 мл
- Питание – аккумулятор Li-ion (1500 mAh)
- Потребляемая мощность – 10 Вт
- Номинальное напряжение – 3,7 В
- Зарядка через кабель USB Type-C
- Время полной зарядки – 4–6 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 30 дней
- Размеры изделия без насадки – 73,3x89,2x205,3 мм
- Размеры изделия с насадкой – 73,3x89,2x282,2 мм
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок ирригатора
- 2 сменные насадки
- Кабель USB Type-C
- Инструкция по эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

М.П. _____

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА

СОБЕРИ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ

СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Электрические звуковые зубные щетки



Благодаря интенсивным колебательным движениям щетины звуковая щетка эффективно очищает поверхности зубов, межзубные промежутки и полирует эмаль.

Чистящее средство



Чистящее средство для ирригатора используется для удаления известковых отложений и загрязнений с внутренних деталей прибора.

Бальзамы и ополаскиватели



Предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний, а также для приготовления растворов для процедур ирригации.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

8 (800) 775-38-49
www.revyline.ru



d.fresh

by Revyline

PORTABLE ORAL IRRIGATOR
ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРЫХ ИМПУЛЬСОВ

Компактная конструкция нового типа с двумя шестеренками небольшого диаметра позволяет DF 3000 работать с использованием технологии быстрых импульсов. Водная струя подается с меньшими интервалами импульсов по сравнению с обычным ирригатором, что повышает ощущение комфорта от процедуры, минимизирует болезненные ощущения и ускоряет процесс привыкания к устройству.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- Перед первым использованием ирригатора полностью зарядите аккумулятор.
- Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C.
- Во время зарядки индикатор заряда мигает красным, при полной зарядке – горит зеленым.
- Проверить уровень заряда можно, удерживая нажатой кнопку управления.

Индикация уровней заряда

- Загораются 5 индикаторов – 80–100%
- Загораются 4 индикатора – 60–80%
- Загораются 3 индикатора – 40–60%
- Загораются 2 индикатора – 20–40%
- Загорается 1 индикатор – менее 20%

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ



В базовой комплектации DF 3000
2 стандартные сменные насадки.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ



Чтобы установить насадку, вставьте ее в разъем и слегка надавите (до щелчка). Чтобы извлечь насадку, удерживайте нажатой кнопку блокировки.

Внимание! Не нажимайте кнопку блокировки насадки во время работы устройства.

НАЧАЛО РАБОТЫ



Чтобы привести прибор в рабочее состояние, нажмите кнопку вкл/выкл.



Нужный режим работы устанавливается последовательным нажатием кнопки управления.

Портативный ирригатор DF 3000 позволяет использовать 5 режимов работы:


⚡ Strong 🦷 Normal 🍃 Soft 🌊 Pulse

👶 Child | с 7–8 лет

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА



Резервуар можно
наполнять двумя
способами.

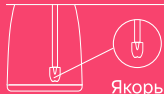

Якорь

Подача воды
из любого положения.

ПРОЦЕСС ИРРИГАЦИИ

- Залейте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °С, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
- Расположите насадку под углом 45° к поверхности зуба.
- Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.
- Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.
- Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.
- Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных промежутках.

В начале использования прибора выбирайте режим с низким уровнем давления, чтобы привыкнуть к ирригационной чистке и не травмировать десну.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора:
Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.
Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°C до +20°C.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Importer: IE Obushenkov M.A., 105043, Moscow, 42 Pervomayskaya St.
Импортер/Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя: ИП Обушников М.А., 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 42
Manufacturer/Производитель: Shenzhen Yuxinyuan Electronic Technology Co., Ltd 301, No. 2, Hudangjia Industrial Park, No. 28, Tongfuyu Industrial Area, Kukeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, China | Сделано в Китае